

Tubifast® 2-Way Stretch®

Vendaje tubular ligero

Tubifast 2-Way Stretch fija los apósitos de forma segura, sin constricción ni compresión

Rápido y fácil de usar significa una reducción del riesgo de contaminación cruzada

Presentación tubular: no requiere fijación adicional

Rápido y fácil de usar: cortar el tamaño y extender sobre el apósito



Menor deshilachado, para un menor riesgo de fibras en la herida


La elasticidad radial y longitudinal de Tubifast 2-Way Stretch permite al paciente una completa libertad de movimientos y un confort añadido¹

Disponible en 5 colores con diferentes anchuras, Tubifast 2-Way Stretch ha sido diseñado para adaptarse cómodamente a las extremidades sin importar la forma o talla


Tubifast 2-Way Stretch proporciona a los pacientes una completa libertad de movimientos y un confort añadido. Ideal para la sujeción de apósitos y protección de la piel, en cualquier parte del cuerpo. También puede usarse como protector de articulaciones y debajo de una escayola y en el tratamiento de la epidermólisis bullosa².

- Completa libertad de movimientos
- No requiere fijación adicional
- Reutilizable después del lavado


Forma de utilización Tubifast® 2-Way Stretch®

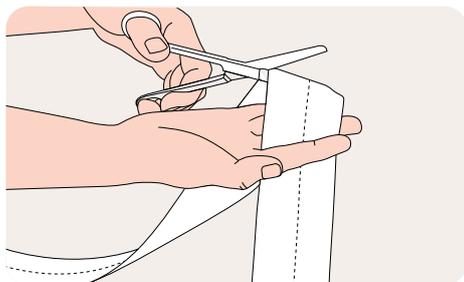

1. Elige la anchura correcta usando la referencia de color, y corta la longitud adecuada.

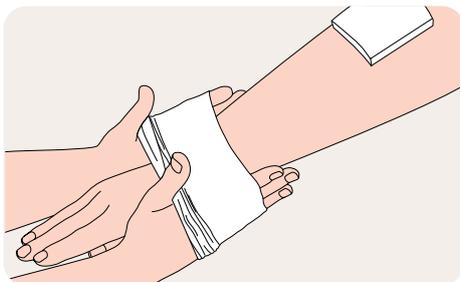

2. Extiende Tubifast 2-Way Stretch sobre el área afectada.

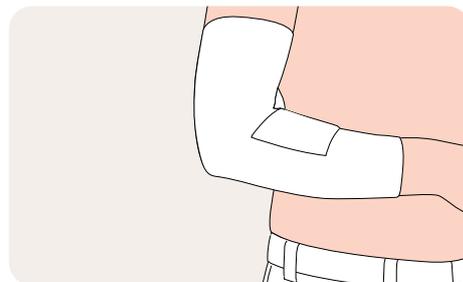

3. Coloca Tubifast 2-Way Stretch cubriendo el apósito. Las instrucciones están ilustradas paso a paso para las aplicaciones más avanzadas.

Cómo funciona Tubifast® 2-Way Stretch®

El nuevo Tubifast 2-Way Stretch es fabricado con viscosa y con hilos muy finos de elastano tejidos radial y longitudinalmente, para proporcionar una excelente elasticidad. Tubifast 2-Way Stretch fija los apósitos de forma segura, sin constricción ni compresión.

Beneficios de Tubifast 2-Way Stretch

- Tubifast 2-Way Stretch fija los apósitos de forma segura, sin constricción ni compresión.
- Su elasticidad radial y longitudinal proporciona a los pacientes una completa libertad de movimientos y un confort añadido¹
- Rápido y fácil de usar: corta la medida y extiéndelo sobre el apósito.
- Menor deshilachado para un menor riesgo de fibras en la herida.
- Sin látex, no sensibilizante y no irritante.
- Reutilizable después del lavado.
- Disponible en 5 colores con diferentes anchuras, Tubifast 2-Way Stretch ha sido diseñado para adaptarse cómodamente a las extremidades sin importar la forma o talla

Indicaciones

Los vendajes tubulares Tubifast 2-Way Stretch están diseñados para sujetar apósitos sin necesidad de fijación adicional; son especialmente adecuados para mantener los apósitos en su sitio en zonas difíciles, como los muñones de los pacientes amputados.

Está diseñado para vendajes húmedos o secos y como malla elástica para debajo de escayolas. Tubifast 2-Way Stretch también se puede utilizar para cubrir la piel de cualquier parte del cuerpo y en el tratamiento de la epidermólisis bullosa².

Instrucciones de lavado



Composición del tejido

Viscosa, elastano y poliamida.



Medidas Tubifast 2-Way Stretch

Color	Anchura x Largura	Miembro 	Ref.
Línea Roja Miembros pequeños	3.5cm x 1m	9-18cm	12480
	3.5cm x 10m	9-18cm	2434
Línea Verde Miembros pequeños y medianos	5cm x 1m	14-24cm	2481
	5cm x 3m	14-24cm	2485
	5cm x 5m	14-24cm	3555
	5cm x 10m	14-24cm	2436
Línea Azul Miembros grandes	7.5cm x 1m	24-40cm	2482
	7.5cm x 3m	24-40cm	2486
	7.5cm x 5m	24-40cm	3556
	7.5cm x 10m	24-40cm	2438
Línea Amarilla Miembros muy grandes, cabezas, tronco de niño	10.75cm x 1m	35-64cm	2483
	10.75cm x 3m	35-64cm	2487
	10.75cm x 5m	35-64cm	3557
	10.75cm x 10m	35-64cm	2440
Línea Púrpura Tronco de adulto	20cm x 1m	64-130cm	2479
	20cm x 5m	64-130cm	3558
	20cm x 10m	64-130cm	2444

Tubifast 2-Way Stretch se presenta en envases individuales

Referencias: 1. Eytier C, Gazeau E, Beneteau G, Verfaillie G. Convenience and tolerance of the combination of a soft silicone foam dressing and a 2-way stretch tubular bandage in the management of local wounds. Journal des plaies et cicatriscations 2013;18(88):38-44.
2. Mölnlycke Health Care. Data on file.

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - Planta 4, Tel: +34 91 484 13 20
Mölnlycke y Tubifast son marcas, nombres y logos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. © 2025 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados. HQIM006537

